

PROCEDURA INSERIMENTO COLLARE

1	SOCCORRITORE B: Immobilizzare il capo con approccio frontale,(se non è possibile approccio laterale) e presentarsi.
2	SOCCORRITORE A: immobilizza e blocca il capo dalla parte posteriore.
3	SOCCORRITORE B: posizionarsi a lato del soggetto
4	SOCCORRITORE B: liberare la zona del collo da indumenti collane e orecchini se ingombranti
5	SOCCORRITORE B: rilevare la distanza tra la base del collo e la linea immaginaria che passa sotto il mento utilizzando le dita della mano
6	SOCCORRITORE B: scegliere il collare in base alla misura rilevata che deve corrispondere alla distanza del perno e il bordo del collare
7	SOCCORRITORE B: posizionare la parte anteriore del collare facendola aderire sotto il mento
8	SOCCORRITORE B: chiudere il velcro dopo averlo fatto scorrere sotto la nuca
9	SOCCORRITORE B: posizionare la parte posteriore facendola scorrere sotto la nuca ripiegando all'interno il velcro evitando che si sporchi
10	SOCCORRITORE B: chiudere la parte posteriore del collare con entrambe le mani facendo leva sulla parte anteriore
11	SOCCORRITORE B: verificare il corretto posizionamento/fissaggio con la collaborazione del soggetto verificando che non sia troppo stretto
12	SOCCORRITORE A/B: durante le manovre coordinarsi tra soccorritori e spiegare le manovre al soggetto soccorso




A	Leader
B	soc 1



CALCOLO MISURA COLLARE



MISURA SUL COLLARE

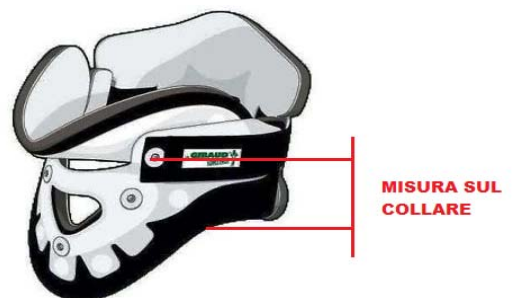

Note:una volta posizionato il collare verificare se troppo stretto