


## NUOVA PROCEDURA INSERIMENTO K.E.D

<b>1</b>	il soccorritore B: chiama il soggetto a voce alta e è verifica lo stato di coscienza "supporto psicologico"	
	il soccorritore B: porta il soggetto in posizione neutra	
	il soccorritore A(leader): si posiziona dietro al soggetto e mantiene immobilizzato il capo manualmente e coordina	
	il soccorritore B:verifica la misura del collare e procede al posizionamento	
	il soccorritore C: prepara il ked	
	il soccorritore B/C: inserire il ked con lato liscio a contatto con la schiena,l'inserimento o dall'alto o lateralmente	
	il soccorritore B/C:avvolgono le ali del corsetto attorno al busto,tirando verso l'alto in modo che calzino bene sotto le ascelle	
	l) il soccorritore B/C: procedere al fissaggio e chiusura delle cinghie come segue	
<b>2</b>	<b>Verde alta</b>	<b>SENZA STRINGERE</b>
<b>3</b>	<b>Gialla centrale</b>	
<b>4</b>	<b>Rossa inferiore</b>	
<b>5</b>	<b>Cosciali</b>	
<b>6</b>	<b>Rossa inferiore</b>	<b>STRINGENDO</b>
<b>7</b>	<b>Gialla centrale</b>	<b>STRINGENDO</b>
<b>8</b>	<b>Inserimento cuscino</b>	<b>SE NECESSARIO</b>
<b>9</b>	<b>Ferma Capo mento - fronte</b>	<b>NECESSARIO</b>
<b>10</b>	<b>Verde alta con mano di tolleranza</b>	<b>STRINGENDO</b>
<b>11</b>	<b>Estricazione</b>	<b>IL LEADER LASCIA CAPO E PREPARA ASSE SPINALE</b>
<b>12</b>	<b>Slacciare cosciali</b>	<b>QUANDO IL SOGGETTO E' SU ASSE SPINALE</b>
<b>13</b>	<b>Slacciare cinghia verde alta</b>	
	<b>Slacciare ferma capo mento</b>	
<b>14</b>	<b>Ripristinare ked in tutte le sue parti</b>	<b>IN MODO CORRETTO PER RIUTILIZZO</b>

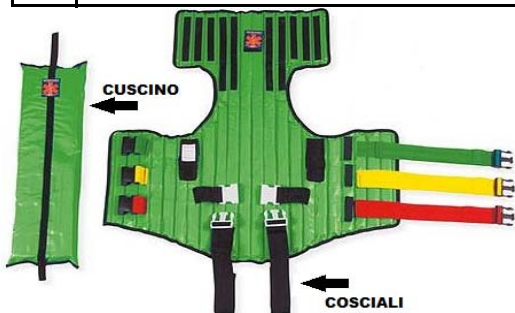

A	Leader
B	soc 1
C	soc 2

NOTE: sulle donne in gravidanza no ripiegare le alette verso l'interno

NOTE: inserire l'asse per estricazione tra coscia e sedile